





# INSTRUMENT TRAYS

**NEW** スコープトレーにマットタイプが新登場


硬性内視鏡はじめ、マットを使用して収納・滅菌したい器具に最適です

## ■ PSTマルチトレー

- 6501A マット無 ￥28,600
- 6502A マット付 ￥33,600  
内寸: 288×72×31mm 外寸: 303×82×47mm
- 6511A マット無 ￥22,500
- 6512A マット付 ￥27,500  
内寸: 406×69×31mm 外寸: 418×80×45mm
- 6521A マット無 ￥30,000  
内寸: 550×80×39mm 外寸: 570×94×53mm  
※ マット付をご希望の場合はご相談ください。

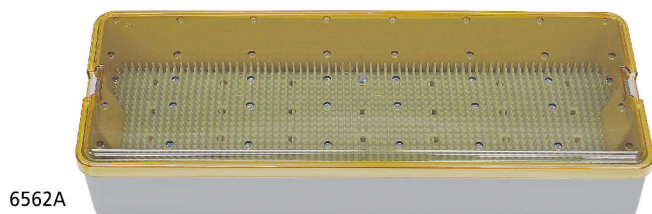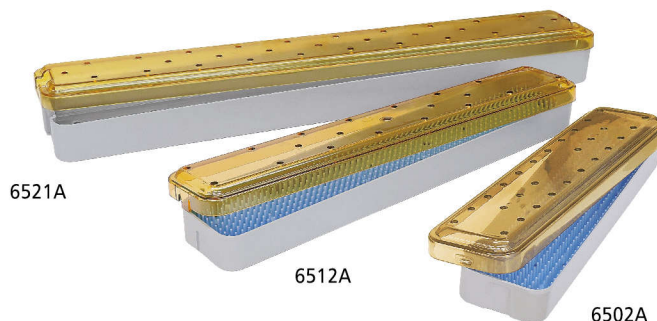

6562A

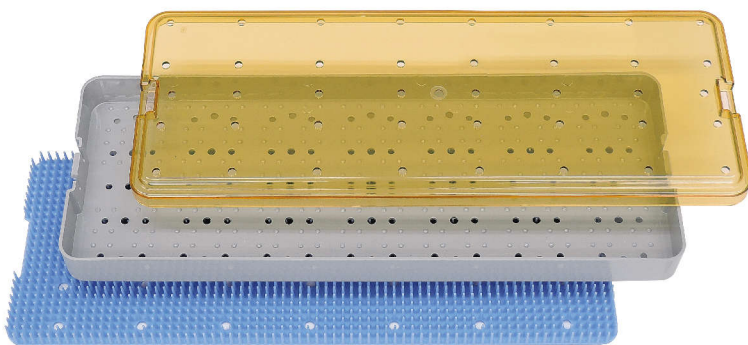

6552A

- 6551A マット無 ￥53,800
- 6552A マット付 ￥63,800  
内寸: 449×163×31mm 外寸: 469×176×46mm
- 6561A マット無 深型 ￥65,000
- 6562A マット付 深型 ￥72,500  
内寸: 425×157×76mm 外寸: 469×176×90mm

PST社の滅菌トレーは、ゼネラルエレクトリック社が開発した「ウルテム」を用いた軽量で耐久性に優れた製品です。

- 対応滅菌 オートクレーブ滅菌 (160°まで)、EOG滅菌。
- ベーストレー内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレーが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。
- フタが高くなっているので、表記のトレー内寸サイズ(深さ)より最大6mmまでプラスして収納可能です。

