



Duckworth & Kent

titanium surgical instruments

Established in 1959




6-667-7

宮田氏結膜弛緩症用アイシールド 11.0mm

¥ 35,000

Miyata Laser Eye Shield

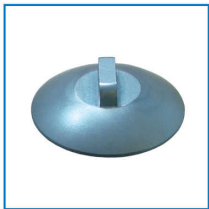


CO₂レーザーによる結膜弛緩症の手術の際、角膜を保護するためにデザインされました。
外表面は反射を抑えるツヤ消し加工で、角膜に接触する部分は滑らかな鏡面仕上げとなっています。

2-660

宮田氏結膜弛緩症用鑷子 3.0×7.0mm

¥ 55,000

Miyata Laser Protection Forceps

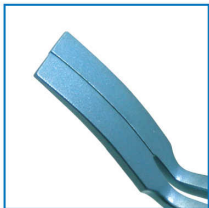

CO₂レーザーによる結膜弛緩症の手術の際、結膜をしっかり和把持するためにデザインされました。
鑷子先端部分は閉じた際、幅3.0mm、長さ7.0mmの広範囲に渡り結膜を覆うよう幅広に加工され
手術部位以外へのレーザー照射をブロックする役目を果たします。

M.E. Technica 株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.mettechnica.co.jp/>

at the Leading Edge