


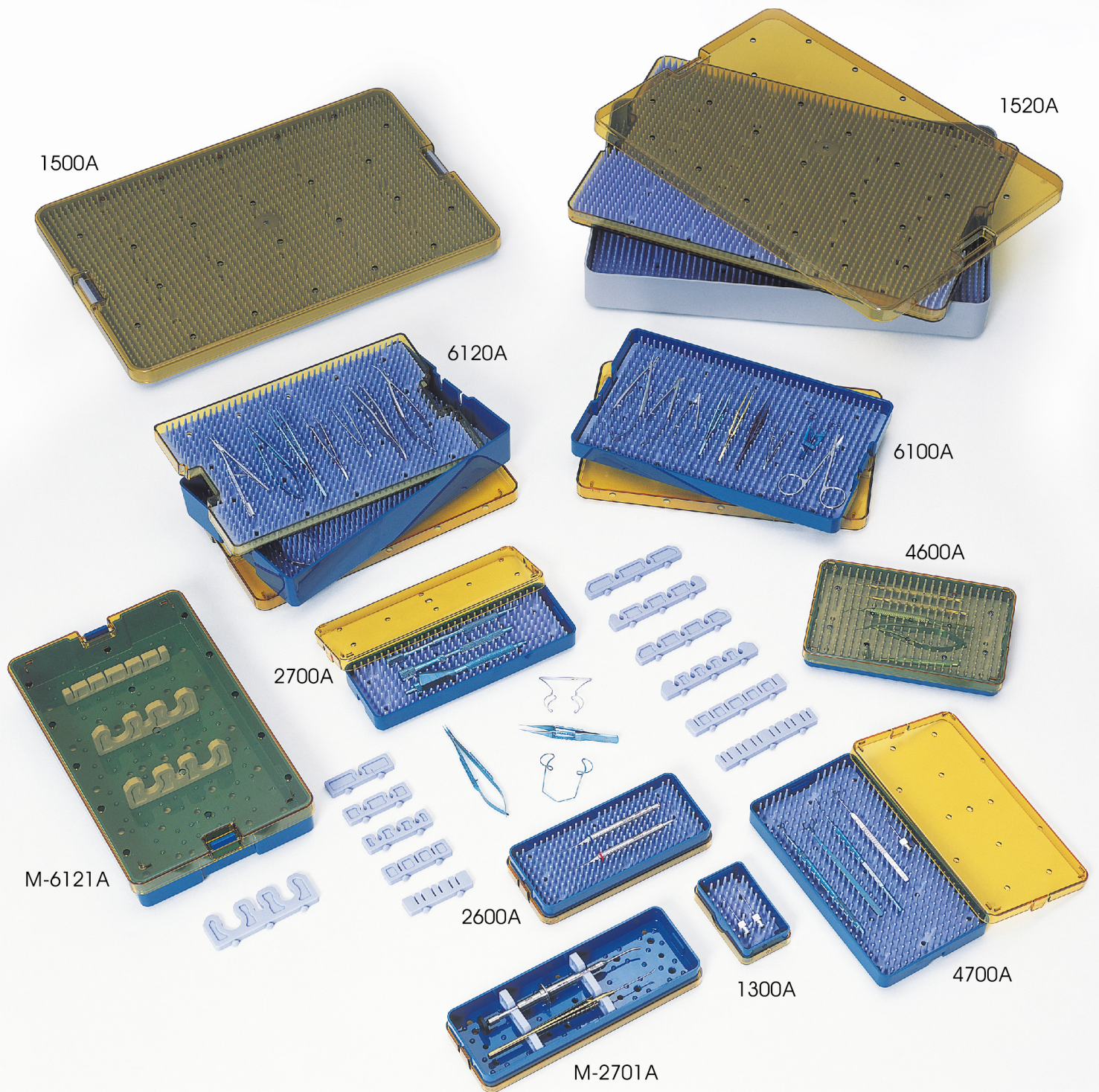

PST

INSTRUMENT TRAYS

can be customized with our unique silicone bar positioning system

- 1500A 381×254×19 マット付 *20本
- 1501A 381×254×19 マット無
- 1520A 381×254×38 マット付/2段 *40本
- 1522A 381×254×38 マット付 深型
- 1521A 381×254×38 マット無 深型

- 6100A 254×152×19 マット付 *10本
- 6101A 254×152×19 マット無
- 6120A 254×152×38 マット付/2段 *20本
- 6124A 254×152×38 マット付 深型
- 6121A 254×152×38 マット無 深型

- 4600A 165×100×19 マット付 *5本
- 4601A 165×100×19 マット無

- 2600A 152×64×19 マット付 *3本
- 2601A 152×64×19 マット無
- 2610A 152×64×32 マット付 深型
- 2611A 152×64×32 マット無 深型

- 1300A 68×38×19 マット付
- 1301A 68×38×19 マット無
- 1310A 68×38×25 マット付 深型
- 1311A 68×38×25 マット無 深型
- 1320A 68×38×32 マット付 深型
- 1321A 68×38×32 マット無 深型


- 4700A 190×100×19 マット付 *5本
- 4701A 190×100×19 マット無
- 4710A 190×100×38 マット付 深型
- 4711A 190×100×38 マット無 深型

- 2700A 190×64×19 マット付 *3本
- 2701A 190×64×19 マット無

Welcome to the PST CONCEPT of Sterilizing Trays

PST社の滅菌トレーは、米国ゼネラルエレクトリック社が開発した新素材[ウルテム樹脂]を用いた軽量で耐久性に優れた製品です。
豊富なサイズバリエーションとアクセサリーが、器具の形状や手術セットに適した収納を実現します。


- 優れた視認性により器具の判別が容易です。
- シリコンバーは着脱が容易で器具の形状に合わせたレイアウトが可能です。器具をしっかりと固定します。
- ガス滅菌や薬液消毒はもちろん、160℃までのオートクレーブにも耐えられます。
- ベーストレイ内側に設けられた小さな丸い突起が、シリコンマットとベーストレイが密着するのを防ぎます。水の貯留を防ぎ乾燥を促進させます。

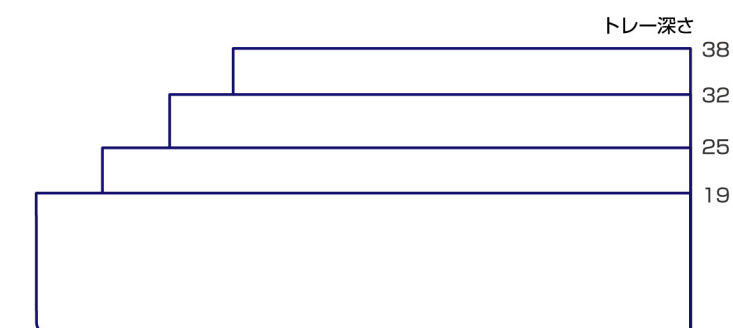

- 実線部分はトレーの内寸および深さを表しています。単位：mm
- マイクロサージェリー器具の収納には深さ19mmのマット付トレーが適しています。
- 収納本数は目安です。

■ シリコンバー


■ 2601A・2701A用
ダイヤモンドナイフやフックの固定に適しています。

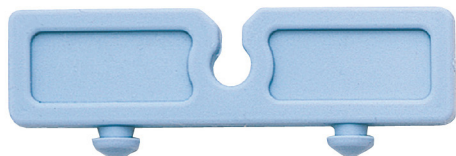


2511S 1スロット 5mmφ 59×16




2512S 2スロット 5mmφ 59×16

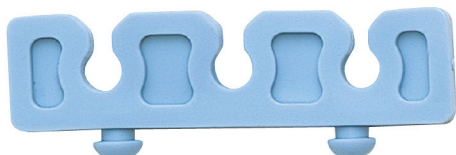


2513S 3スロット 5mmφ 59×16

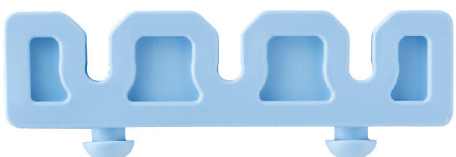


2503S 3スロット 3mmφ 59×16

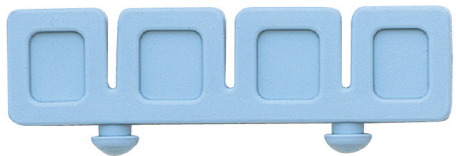


2523S 3スリット 59×16

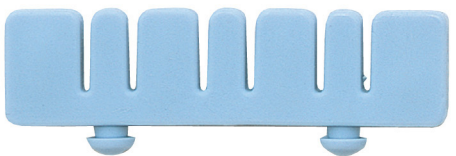

2526S 6スリット 59×16

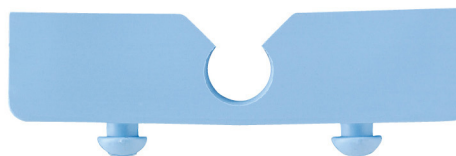


2519S 1スロット 9mmφ 61×20

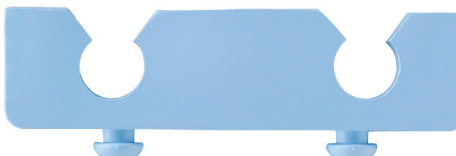


69561S 2スロット 9mmφ 61×20

■ 4601A・4701A用
ダイヤモンドナイフやフックの固定に適しています。

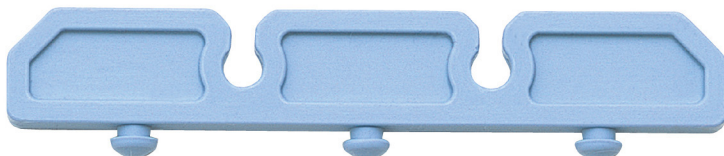


4612S 2スロット 5mmφ 96×16

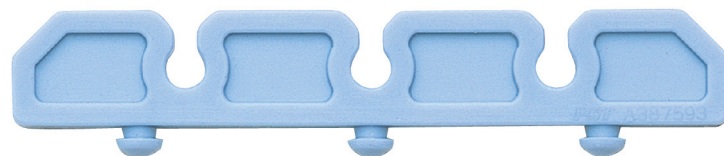


4613S 3スロット 5mmφ 96×16




4614S 4スロット 5mmφ 96×16

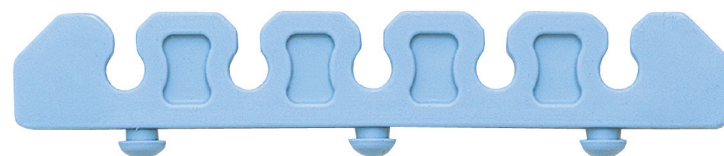

4615S 5スロット 5mmφ 96×16

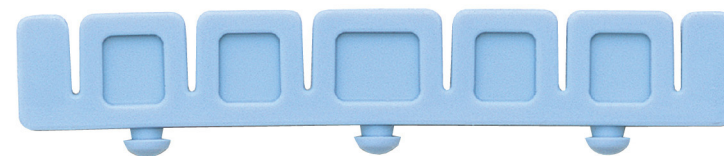

4666S 6スリット 96×16

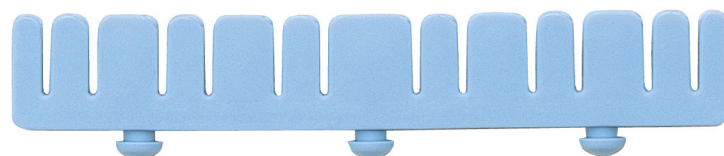

4669S 12スリット 96×16

ナイフやフックをしっかりと固定します。2個1組で使用します。

■ 4711A・6121用

ハンドルの径が太い器具の収納に適しています。



6501S 2スロット 12mmφ、8mmφ 67×31



6502S 2スロット 8mmφ 67×31



2311S 1スロット 16mmφ 80×31




2312S 1スロット 6mmφ 80×31

■ 6121用

フェイコハンドピースやI/Aハンドピースなど、ハンドルの径が太い器具の固定に適しています。



2313S 3スロット 6mmφ 91×31

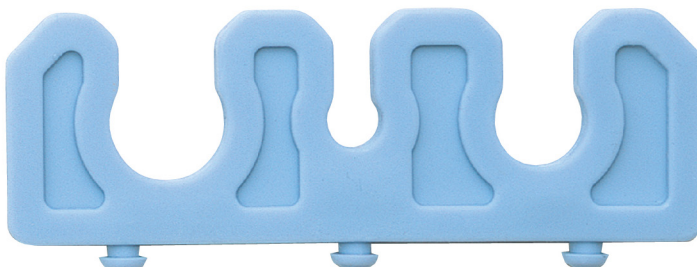


2314S 3スロット 16mmφ、6mmφ、12mmφ 91×31

■ シリコンバーの取り付け方法



シリコンバーの突起をベーストレイの穴に合わせ
シリコンバーを動かしながら押し込みます。

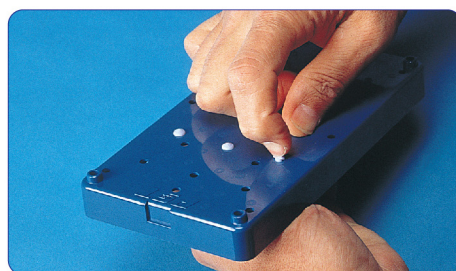


ベーストレイの外側に押し出された突起がしっかりと
固定するように指先で整えます。



収納例：1セット

M-2600A ゴイダー社マイクロ鑷子・剪刀システム用滅菌トレイ 152×64×19


チップとハンドルを最大2セット安全に収納することができます。収納するチップとハンドルの数をお知らせください。

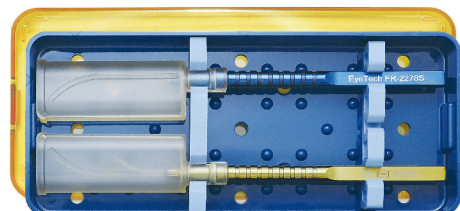

M-2603A ショートハンドル器具用滅菌トレイ 1本用/大スロット 152×64×19

● **M-2602A** ショートハンドル器具用滅菌トレイ 2本用/大スロット 152×64×19


プロテクションキャップが取り付けられた、池田氏マイクロカブスロレキス鑷子・八重氏マイクロ虹彩剪刀ショートハンドルモデルの収納に適しています。

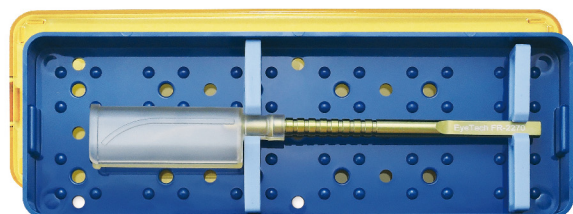

● **M-2703A** 硝子体器具用滅菌トレイ 1本用/大スロット 190×64×19

M-2702A 硝子体器具用滅菌トレイ 2本用/大スロット 190×64×19

プロテクションキャップが取り付けられた硝子体器具等の収納に適しています。


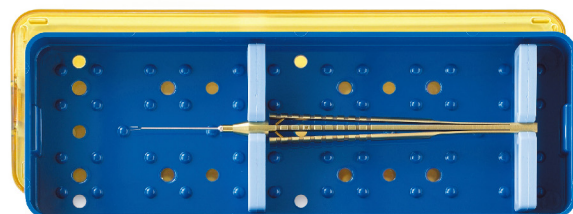


● **M-2701S** 硝子体器具用滅菌トレイ 1本用/小スロット 190×64×19

M-2701A 硝子体器具用滅菌トレイ 2本用/小スロット 190×64×19


M-4701A 硝子体器具用滅菌トレイ 4本用/小スロット 190×100×19

プロテクションキャップが取り付けられていない硝子体器具等の収納に適しています。

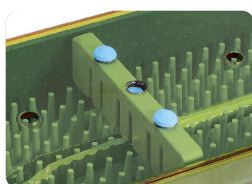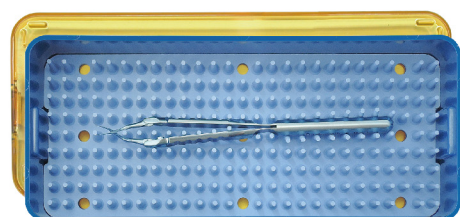

M-2610A
カブスロレキス鑷子・インジェクター用滅菌トレイ 152×64×32

繊細なチップ先端がマットやトレイに触れないよう、深底のトレイにチップを上に向けて収納します。フタには鑷子を固定するためのバーが取り付けられています。

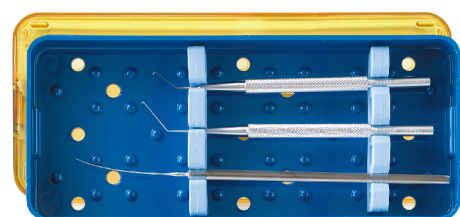

M-2601A フック用滅菌トレイ 3本用 152×64×19

フックやチョッパーの収納に適しています。

