




Mi-3006 浅野氏フック付灌流ハンドピース 23G 0.3×0.5mm

¥ 79,800


バイマニュアルI/AやA-vit使用時、虹彩拡張デバイスや前房メインテナーを使用せずに手術を行うために考案された製品です。先端には非常に小さな球状のフックが付いており、眼内灌流を行いながら虹彩拡張や硝子体のワイパリングが可能です。外径は23Gで20Gのサイドポートから無理なく挿入可能です。

小瞳孔例に対するバイマニュアルI/A

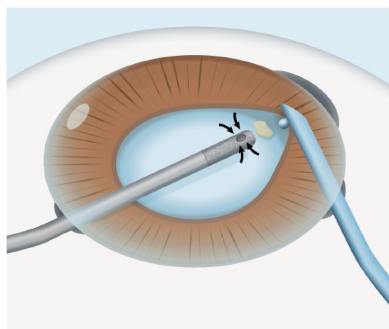

灌流を行いながらフックで虹彩を拡張し虹彩下の皮質を吸引します。

A-vit時の硝子体ワイパリング

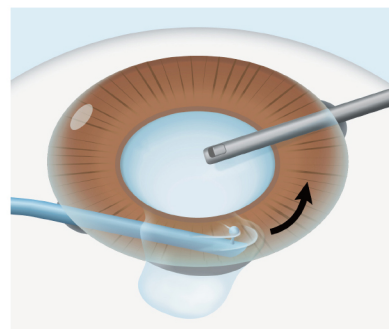

灌流を行いながら、脱出硝子体をワイパリングします。

