

QUICK & EASY
ANIMAL IOP MEASURING

icare
TONOVET
Plus

トノベットPlus 手持眼圧計
TV011



icare TONOVET Plus

トノベットPlusは、アイケアフィンランド社により開発された
麻酔薬不要の手持眼圧計です。

- 面倒なキャリブレーションは不要で、プローブを装填したらわずか数秒で測定を完了します。
- 測定に特別なテクニックは不要です。再現性の高いデータが得られます。
- プローブは清潔に個包装されたディスポーザブルタイプ。
直径はわずか1.7mmで、角膜への接触もソフトなため、点眼麻酔は不要です。

The new level of veterinary IOP Measuring

トノベットが進化！Plusでは【4つの新機能】が搭載され、使いやすさと精度が向上されました。

BETTER ACCURACY

トノベットPlusは犬、猫、ウサギ、馬と4つの動物種に合わせて測定できる唯一の眼圧計です。
動物の眼は種によって特徴があり、その種に合わせた設定を選択することで、正確な眼圧測定が可能です。



EASIER TO USE



icare® モードセレクト

シングル・連続の2つの測定
モードが選べます。



icare® イージーナビ

大きくなったディスプレイと、
使いやすいユーザーインター
フェースが特徴です。



icare® イージーポジショニング

測定位置サポート機能で正しい測定位置を赤と緑のLEDで
知らせます。





IOP measuring with the **TONOVET Plus**




NO ANESTHESIA
NO CALIBRATION





トノベットPlusは動物種ごとに、マノメトリー※を用いた眼圧値と相関するよう設計されています。

※ 眼球にカニューラを挿入して実際の眼圧値を求める方法

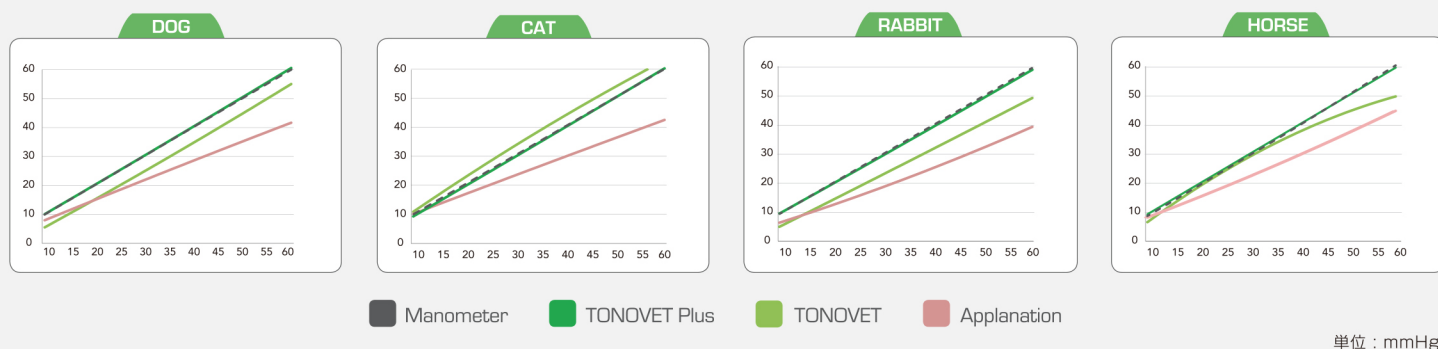

仕様	
製品番号	TV011
測定範囲	10～60mmHg
データ保存	10件
寸法	約24-29mm(W)×35-95mm(H)×215mm(L)
重量	約230g(電池込み)
電源	単3アルカリ電池 4本
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器
動物用医療機器承認番号	29動薬第3745号
製造業者	アイケア フィンランド社 (Icare Finland Oy)

TV011 トノベットPlus 手持眼圧計

840,000円(税別)

製品構成：トノベットPlus手持眼圧計本体
ディスプレイブルプローブ100本、プローブベース、単3アルカリ電池4本、取扱説明書、操作ガイド、保証書、キャリングケース

消耗品：TV011-1 ディスボーザブルプローブ100本入 22,000円(税別)
TV011-2 プローブベース 13,000円(税別)

TA650 卓上・壁掛けスタンド トノベットPlus用

28,000円(税別)

トノベットPlus手持眼圧計用のスタンドです。
卓上・壁掛け、2通りのご使用ができます。

幅130mm×高さ295mm
奥行き160mm(卓上)／115mm(壁掛け)



M.E.Technica

株式会社 エムイーテクニカ

〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866

営業所：札幌／仙台／名古屋／大阪／福岡

www.mettechnica.co.jp

製造販売業許可番号：3製販療Ⅱ第16号

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

202506-5-2000