

daVinci[®]
Surgical System Instrument
Protection Trays



INSTRUSAFE


滅菌トレーカタログ

プラズマ滅菌対応

対応滅菌方法:

プラズマ滅菌、オートクレーブ滅菌、
EOG滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

材質:アルミニウム・シリコン

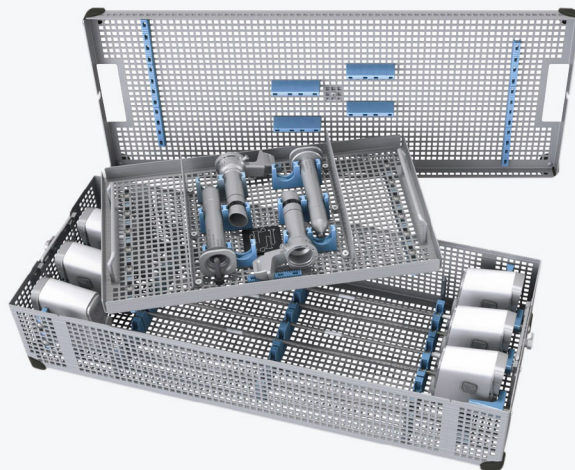

summit
medical

INDEX

da Vinci SP

- P02 インストゥルメントトレイ
- P03 プロシージャートレイ
- P03 カメラトレイ
- P03 アクセサリートレイ

da Vinci Xi/X

- P04 EndoWrist インストゥルメントトレイ
- P05 プロシージャートレイ
- P05 アクセサリートレイ
- P06 ステープラートレイ
- P07 ステレオエンドスコープトレイ

Transport Container


- P08 トランスポートコンテナ XL
- P08 リフティングトレイ

INTUITIVE.

「da Vinci, SP, Xi, X, EndoWrist」は、
Intuitive Surgical社の登録商標です。




INSTRUSAFE 製品の特長

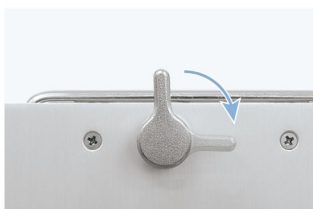

レバー操作で確実にロック

フタの向きが正しくないとロックできない構造です。レバーを90°回転させるとフタがロックされます。

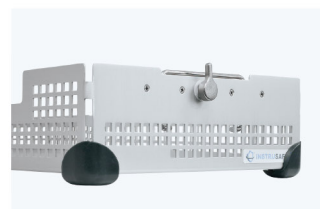


安心のプロテクター付

シリコン製のコーナーガードが滅菌ラップの破れを防ぎます。



持ち運びに便利なハンドル付


トレイは軽量・堅牢なアルミニウム製。格納式のハンドルが付いているので安全に持ち運びできます。

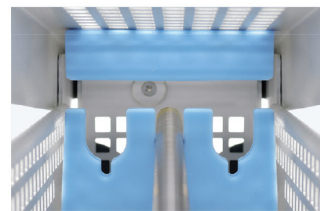


器具を360°全方位から保護

柔軟性に富んだシリコンバーが器具をしっかりと固定・保護します。

サイズ表記 イラストに表された箇所を計測しています

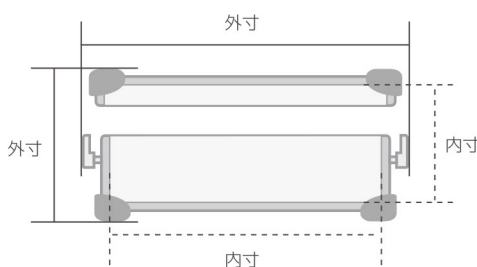

インストゥルメントトレイ

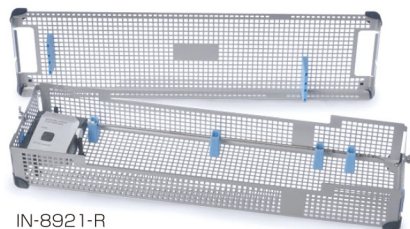


IN-8921-R

IN-8921-R

ダビンチ SP インストゥルメント 1本用トレイ

¥ 190,000

内寸：679×175×94mm／外寸：703×191×114mm

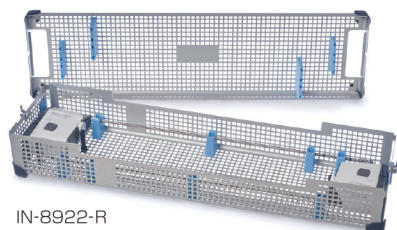


IN-8922-R

IN-8922-R

ダビンチ SP インストゥルメント 2本用トレイ

¥ 250,000

内寸：679×175×94mm／外寸：703×191×114mm

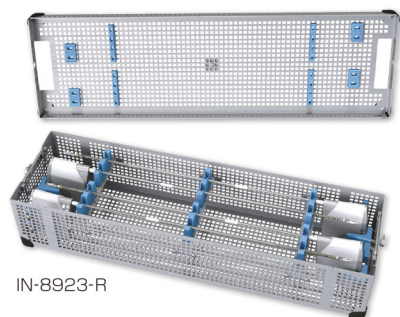


IN-8923-R

IN-8923-R

ダビンチ SP インストゥルメント 4本用トレイ

¥ 390,000

内寸：711×203×137mm／外寸：734×219×157mm

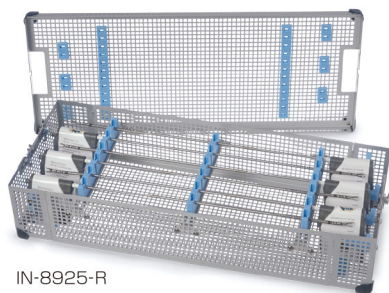

IN-8925-R


IN-8925-R

ダビンチ SP インストゥルメント 6本用トレイ

¥ 450,000

内寸：711×279×137mm／外寸：734×295×157mm

プロシージャートレー

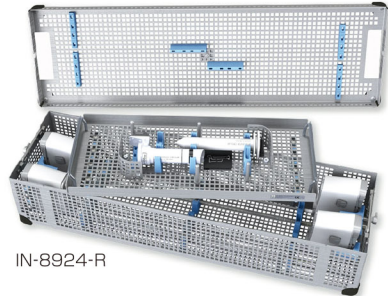

IN-8924-R


IN-8924-R

ダビンチ SP プロシージャー インストゥルメント4本+アクセサリ用トレイ

¥ 550,000

収納可能製品：インストゥルメント 4本、カニキュラ または オプチュレーター 2本

内寸：711×203×137mm／外寸：734×219×157mm

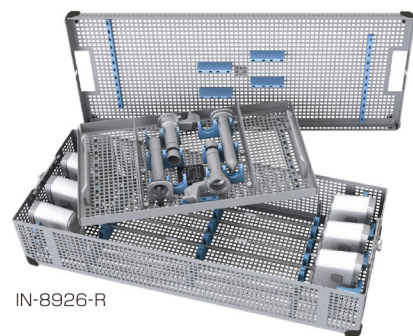

IN-8926-R

IN-8926-R

ダビンチ SP プロシージャー インストゥルメント6本+アクセサリ用トレイ

¥ 680,000

収納可能製品：インストゥルメント 6本、カニキュラ または オプチュレーター 4本

内寸：711×279×137mm／外寸：734×295×157mm

アクセサリートレー



IN-8927-R

IN-8927-R


ダビンチ SP アクセサリー用トレイ

¥ 320,000

収納可能製品：カニキュラ または オプチュレーター 4本、コード 2本

内寸：387×244×60mm／外寸：410×260×80mm

カメラトレイ

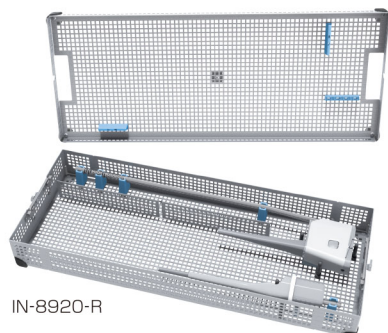

IN-8920-R


IN-8920-R

ダビンチ SP カメラ用トレイ

¥ 330,000

内寸：711×279×76mm／外寸：734×295×96mm

EndoWrist® インストゥルメントトレイ

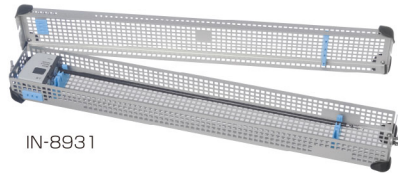

IN-8931

IN-8931

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 1本用トレイ ￥125,000

内寸：689×89×52mm／外寸：713×103×72mm




IN-8947

IN-8947

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 2本用トレイ ￥170,000

内寸：689×85×90mm／外寸：713×102×109mm

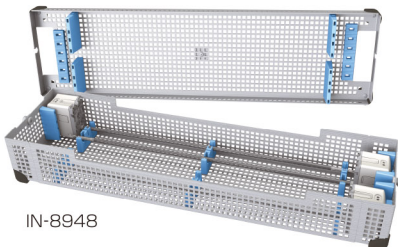


IN-8948

IN-8948

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 3本用トレイ ￥240,000

内寸：679×175×94mm／外寸：703×190×114mm

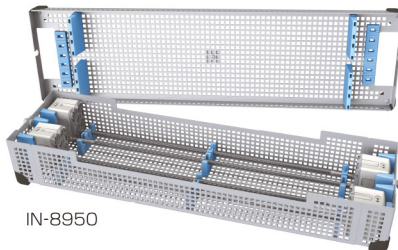


IN-8950

IN-8950

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 4本用トレイ ￥260,000

内寸：679×175×94mm／外寸：703×190×114mm

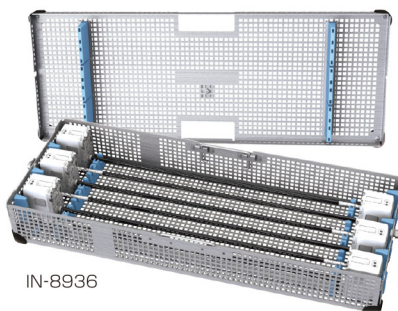

IN-8936

IN-8936

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 6本用トレイ ￥300,000

内寸：678×254×92mm／外寸：702×270×114mm




IN-8938

IN-8938

ダビンチ Xi/X EndoWrist インストゥルメント 8本用トレイ ￥380,000

内寸：678×330×92mm／外寸：702×345×114mm

プロシージャートレー

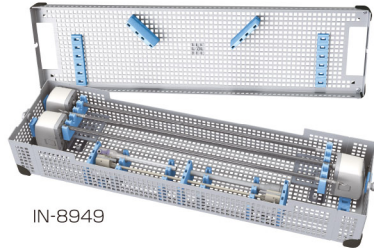


IN-8949

IN-8949

ダビンチ Xi/X プロシージャ インストゥルメント3本+アクセサリ用トレイ
¥ 370,000

収納可能製品：EndoWrist インストゥルメント 3本、カニキュラ または オプチュレーター 6本
リリースキット 1個

内寸：679×175×94mm / 外寸：703×190×114mm

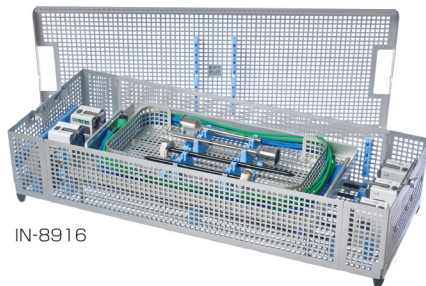

IN-8916

IN-8916

ダビンチ Xi/X プロシージャ インストゥルメント6本+アクセサリ用トレイ
¥ 570,000

IN-8915

ダビンチ Xi/X プロシージャ インストゥルメント4本+アクセサリ用トレイ
¥ 550,000

収納可能製品：EndoWrist インストゥルメント 4本
カニキュラ または オプチュレーター 6本、コード2本、リリースキット 1個

IN-8916 内寸：711×279×138mm / 外寸：735×295×158mm

IN-8915 内寸：711×203×138mm / 外寸：735×218×158mm



IN-8935

IN-8935

ダビンチ Xi/X プロシージャ インストゥルメント8本+アクセサリ用トレイ
¥ 585,000

収納可能製品：EndoWrist インストゥルメント 8本
カニキュラ または オプチュレーター 6本、コード2本、リリースキット 1個

内寸：678×330×92mm / 外寸：702×345×114mm

アクセサリートレー



IN-8939

IN-8939


ダビンチ Xi/X アクセサリ用トレイ
¥ 330,000

収納可能製品：カニキュラ または オプチュレーター 6本、コード3本、リリースキット 1個

内寸：498×245×51mm / 外寸：520×260×70mm

ステープラー+アクセサリートレー

ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。

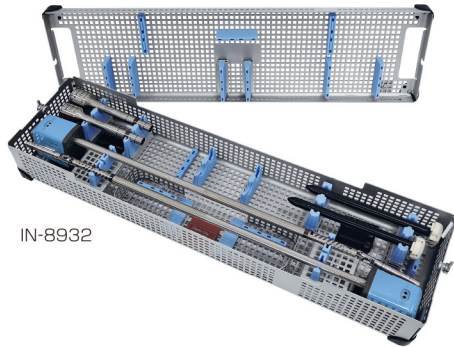

IN-8932

IN-8932

ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント2本+アクセサリ用トレイ

¥ 440,000

収納可能製品：ステープラー インストゥルメント 2本、ステープラー カニユーラ 12mm 2本
 ステープラー プラント オプチュレーター 12mm 2本
 ステープラー リリースキット 1個

内寸：680×173×92mm／外寸：700×190×113mm



IN-8933

IN-8933

ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント1本+アクセサリ用トレイ


¥ 250,000

収納可能製品：ステープラー インストゥルメント 1本、ステープラー カニユーラ 12mm 1本
 ステープラー プラント オプチュレーター 12mm 1本
 ステープラー リリースキット 1個

内寸：690×85×90mm／外寸：714×100×109mm

ステープラートレー

ステープラー 45・30 どちらも収納出来ます。

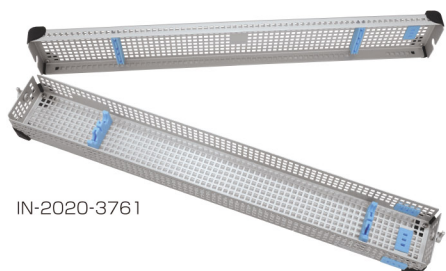

IN-2020-3761


IN-2020-3761

ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント1本用トレイ

¥ 100,000

収納可能製品：ステープラー インストゥルメント 1本

内寸：689×89×52mm／外寸：713×103×72mm

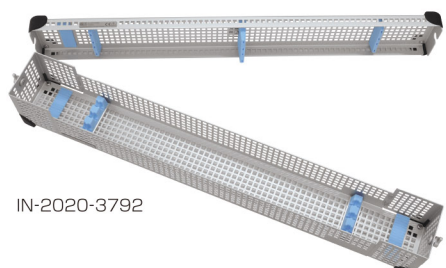

IN-2020-3792

IN-2020-3792

ダビンチ Xi/X ステープラー インストゥルメント2本用トレイ


¥ 110,000

収納可能製品：ステープラー インストゥルメント 2本

内寸：689×85×90mm／外寸：713×100×109mm

ステレオエンドスコープトレイ

※こちらはステンレス製です。

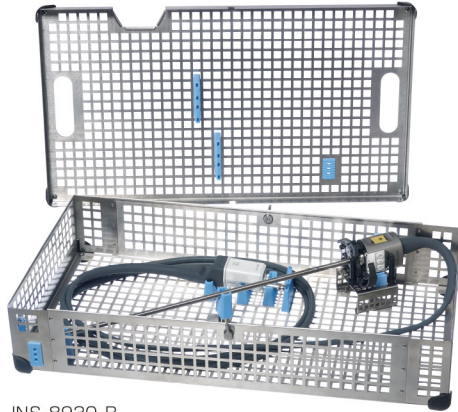

INS-8930-R

INS-8930-R

ダビンチ Xi/X ステレオエンドスコープ用トレイ

¥ 395,000

収納可能製品：ステレオエンドスコープ1本

内寸：632×343×111mm / 外寸：654×355×131mm

ハッサンコーン取付用 シリコンバーキット

※取り付けはお客様作業となります。




M-KIT-HC

ハッサンコーン取付用 シリコンバーキット

¥ 28,500

構成品：IN-3951×2 (ベース側)、IN-6873×1 (フタ側)

取付例

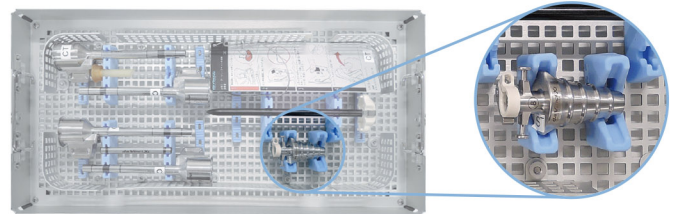

IN-8939 ダビンチ Xi アクセサリートレイ

プロテクター



IN-7334

交換用 ラウンドプロテクター (4個セット)

¥ 13,000

Transport Container

トランスポートコンテナー XL

トランスポートコンテナーは、リフティングトレーと合わせて使用することにより、器具を浸漬させた状態で安全に手術室から中央材料室へ運搬することができます。

フタ

バイオハザードマークがデザインされ、浸漬開始時刻を書き込むことができます。



水漏れ防止

フタ内側のガスケットとシリコン製伸縮留め具で浸漬用洗浄剤が漏れないようしっかり密閉します。

優れた耐久性

耐久性の高いポリカーボネートを使用しています。



ドレインチューブ

トレーを傾けることなく排水できます。

リフティングトレー

da Vinci®インストゥルメントやXiスコープを水平に置いて浸漬できます。


酵素系洗剤使用可能

ウォッシャーディスインフェクターで洗浄できます。



アクセサリートレー

小さな付属品を収納します。

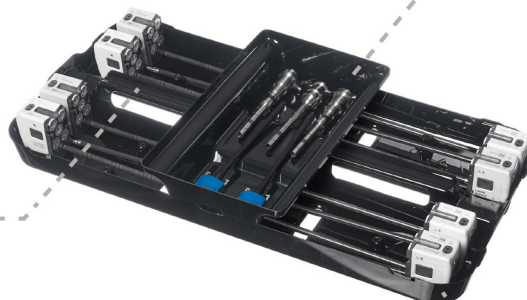

ハンドル

左右にあるハンドルを持ってコンテナーから安全に引き上げます。

リフティングトレー

Transport Container



IN-PIC-20-D

IN-PIC-20-D

トランスポートコンテナー XL

¥ 150,000

内寸:680×320×140mm／外寸:870×450×165mm



IN-PIC-20-D-LT

IN-PIC-20-D-LT

トランスポートコンテナー XL リフティングトレイ付

¥ 175,000

収納可能製品:ダビンチ Xi エンドスコープ または *EndoWrist* インストゥルメント(最大8本)
アクセサリ

内寸:680×320×140mm／外寸:870×450×165mm

交換パーツ

IN-PIC-31	トランスポートコンテナー XL 交換フタ用ガasket	¥ 10,000
IN-PIC-32	トランスポートコンテナー XL 交換ドレインチューブ・コネクタ	¥ 10,000
IN-PIC-33	トランスポートコンテナー XL 交換フタラッチ(4個入)	¥ 11,000



【Xi スコープ 収納例】



【Xi インストゥルメント 収納例】

IN-PIC-34

トランスポートコンテナー XL リフティングトレイ

¥ 50,000

収納可能製品:ダビンチ Xi エンドスコープ、アクセサリ または
ダビンチ Xi *EndoWrist* インストゥルメント(最大8本)、アクセサリ

リフティングトレイ:680×320×70mm

アクセサリトレイ:315×130×70mm



made in U.S.A

