

iphone X slit lamp



iPhone
専用

スリットランプ
METORI-50 II

本体重量

約 **96 g**

(7・8・SEモデル)

連続照明時間

約 **10** 時間

アプリ

不要

スリットランプ METORI-50 II

iPhoneに装着して使用する
手のひらサイズのスリットランプです。

診察

撮影


共有

軽量・小型で手軽に持ち運び
できます。

- コンパクトな本体は携帯性に優れ、外来や往診など様々な場所で使用できます。
- 片手で保持しやすく、観察や撮影も自然な姿勢で行えます。

メールやメッセージアプリなどを使用して
撮影データを共有できます。

- 患者さんへの説明
- 電子カルテへのデータ移行
- 遠隔での画像診断が可能
- 研修医や非眼科医への診療支援など、幅広く活用できます。

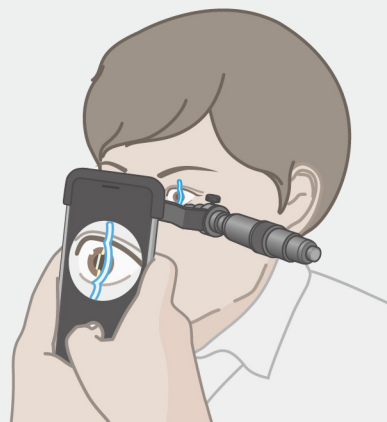


■ 製品の特長



カメラと光学部の
位置調整は不要です。

アダプターは各種iPhone専用
に設計され装着は簡単です。

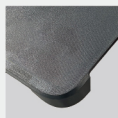

堅牢で衝撃に強いABS
樹脂製のアダプターが
iPhoneを守ります。

*iPhone7・8・SEは非対応



専用のアプリは不要です。

iPhoneの機能だけで、簡単に観察
や動画撮影が行えます。

各種LED照明光装置

検査の目的に応じて専用の照明装置を使用します。

[セット付属品]

① MP2-004 スリット光照明装置 ￥52,000 (税抜)

結膜や角膜、虹彩など前眼部の観察に使用します。
スリット幅:0.3mm

② MP2-005 青色光照明装置 ￥42,000 (税抜)

フルオレセイン検査時に付属の蛍光フィルターと
併せて使用します。

[オプション]

③ MP2-007 スポット光照明装置 ￥52,000 (税抜)


水晶体などの混濁の有無を観察する際に使用して、
白内障の程度を知ることができます。

④ MP2-008 拡散光照明装置 ￥52,000 (税抜)

角膜や結膜など、眼全体を観察する際に使用します。



全長:120~131mm

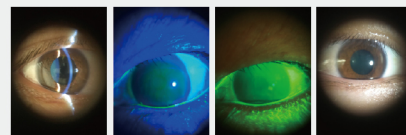

スリット光

青色光

青色光

拡散光

■ 製品情報

iPhone 12~16用

￥191,000 (税抜)

MS2-0012-120: iPhone 12 / MS2-0012-121: iPhone 12 mini
MS2-0012-130: iPhone 13 / MS2-0012-131: iPhone 13 mini
MS2-0012-140: iPhone 14
MS2-0012-150: iPhone 15
MS2-0012-160: iPhone 16

iPhone 7・8・SE用


￥178,000 (税抜)

MS2-0012-70: iPhone 7・8・SE


[セット構成]

* iPhoneは別売りです

光学部本体 + アダプター + ①スリット光照明装置 + ②青色光照明装置
+ 蛍光フィルター + リチウム電池 CR2×2本 + ケース

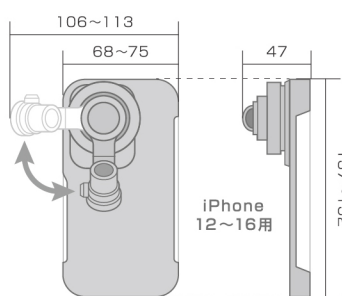

iPhone
12~16用

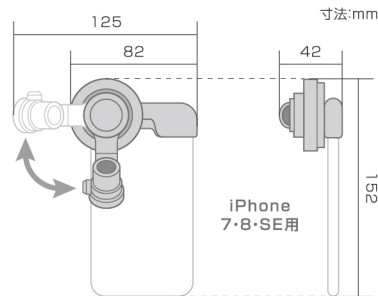

iPhone
7・8・SE用

レンズ : 光学ガラス

撮影倍率: 3.5倍

撮影距離: 50mm

照射角 : 撮影レンズに対して45°

光源 : LED

電源・電圧 : DC3V (リチウム電池CR2×1本)

連続照明時間: 約10時間

重量 : 120g / 96g

薬事情報

販売名: スリットランプ METORI-50 II / 一般的名称: 細隙灯顕微鏡 / 届出番号: 13B2X00180000081 / クラス分類: クラスI / 製造元: 株式会社 井澤 *iPhoneは、Apple INC.の商標です。

